



**A&A BIOTECHNOLOGY**  
innovating life science

## **Instrukcja**

# **DNA Marker 2**

Zakres 50-1000 pz

<b>numer katalogowy</b>	<b>wielkość</b>
3005-500	100-250 aplikacji

Produkt przeznaczony wyłącznie do badań naukowych.

### **Gwarancja**

Firma A&A Biotechnology udziela gwarancji na niniejszy produkt.

Firma nie gwarantuje poprawnego działania produktu w przypadku:

- odstępstwa od dostarczonego wraz z produktem protokołu
- braku zalecanego w niniejszym protokole wyposażenia i materiałów
- użycia innych odczynników niż zalecane lub które nie wchodzą w skład produktu
- użycia przeterminowanych odczynników oraz elementów produktu

## Opis

**DNA Marker 2** jest markerem wielkości cząsteczkowej o zakresie 50-1000 par zasad. Dodatkowo zawiera dwa barwniki, które pozwalają na wizualną obserwację migracji cząsteczek DNA podczas elektroforezy.


DNA Marker 2 składa się z fragmentów o ściśle zdefiniowanej wielkości od 50 do 1000 pz. Wszystkie fragmenty posiadają tępe końce.

## Skład

składnik	ilość	stężenie	przechowywanie
DNA Marker 2	500 µl	0,1 µg/µl	4-8 °C
<b>Bufor do przechowywania:</b> 10 mM Tris-HCl, pH 8,5; 5 mM EDTA			
<b>6x bufor obciążający:</b> 3% ficoll, 0,003% bromophenol blue, 0,003% xylene cyanole FF			

## Zastosowanie

**Rekomendowane użycie:** 2-5 µl markera na ścieżkę.

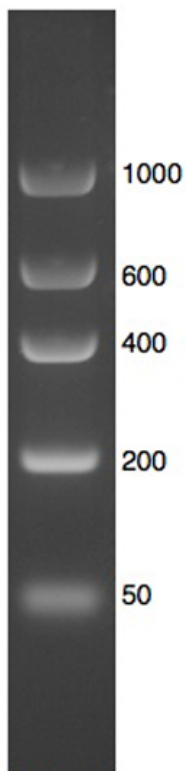

2% żel agarozowy

Długości fragmentów DNA: 50, 200, 400, 600, 1000 pz.



**A&A BIOTECHNOLOGY**  
innovating life science

A&A Biotechnology, ul. Strzelca 40, 80-299 Gdańsk  
tel. 883 323 761, 600 776 268  
info@aabiotech.com, www.aabiotech.com

